

AEDPRO[®]

real **CPR** help[®]

No existen las tareas difíciles.



ZOLL[®]
Advancing Resuscitation. Today.™

Justo lo que necesitaba. Un desfibrilador sólido con un diseño avanzado y resistente.

Es hora de que cuente con un equipo diseñado para la lluvia fuerte, el calor abrasivo y el frío glacial. Para las caídas y golpes, salpicaduras y manchas. Para la suciedad y el barro. Para el uso apresurado de los equipos mientras esquiva el tráfico en las calles concurridas. ZOLL® desarrolló un desfibrilador totalmente nuevo pensando en usted y en sus necesidades. El AED Pro®. Porque en su trabajo, ya tiene mucho de que preocuparse. Y no deberá preocuparse por el equipo. Nunca más.



No le recomendamos que pase por encima con la ambulancia, pero es posible hacerlo

Excelente fabricación, con un recubrimiento exterior de resina de policarbonato con siloxano (el mismo material que se utiliza en los cascos de rugby) y un interior muy duradero de uretano termoplástico, brindan una protección sin igual. A diferencia de otros DEA, el AED Pro tiene un índice IP55 para la resistencia al agua en chorros de agua a presión, y pasa una prueba de caída de 1,5 metros.

Ningún otro desfibrilador puede soportar este tipo de daños.


Un cable de tres derivaciones permite un control básico a través de los electrodos del ECG.



La frecuencia y la profundidad de compresión del tórax se miden en tiempo real, proporcionando información visual y sonora opcional. Todos los datos de la RCP se pueden registrar y revisar usando el software RescueNet™ Code Review.

realCPRhelp®

see-thruCPR™

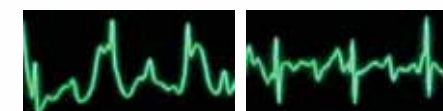

Sin filtrar

Filtrado

El procesamiento de la señal del ECG se obtiene del aparato de RCP del ECG a fin de observar los ritmos organizados sin interrumpir las compresiones.

Parches de una o dos piezas. Usted elige.

Elija un **CPR-D•padz®** de una pieza o un **CPR stat•padz®** de dos piezas.

Colocación rápida y precisa e información sobre la RCP sin sensores ni pasos adicionales.

Almacenamiento de datos a través de la tecnología de memoria USB

El AED Pro tiene una memoria interna amplia y una memoria flash USB extraíble para transferir datos a través del puerto USB desde su AED Pro sin apagar el desfibrilador.

Transferencia de datos sencilla a cualquier computadora portátil o PC de tal forma que queda preparado para su próxima utilización.

Capacidad de batería sin comparación

Tres opciones para satisfacer sus necesidades:

1. Baterías de plomo selladas para la estandarización de ZOLL M Series®, E Series®, y AED Pro®.
2. SurePower™ recargable con iones de litio para una mayor capacidad y una duración más prolongada.
3. Baterías de litio-manganeso desechables de larga duración.

Un número mayor de opciones representan una mejor adaptación a su sistema.

Pantalla de LCD que muestra toda la información importante.

Se pueden ver fácilmente las formas de onda del ECG, la frecuencia cardíaca, el número de descargas suministradas y la profundidad de compresión de la RCP.

Toda la información que necesita de una sola vez.

Soporte vital avanzado y soporte vital básico. Con el modo de funcionamiento que usted desee.

Semiautomático, semiautomático con anulación manual y manual. Elija el modo de funcionamiento adecuado para su sistema.

Funciona cómo y cuándo lo necesite.



ZOLL Medical Corporation
Oficinas centrales
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com

**Sucursales de venta
directa de ZOLL**
Alemania, +49 2236 87 87 0
www.zollmedical.de
Australia, +61 2 8424 8700
www.zoll.com.au
Austria, +43 650 413 6222
www.zollmedical.at
Canadá, 905-629-5005
www.zoll.com

China, +86 21 6226 9505
www.zoll.com
Francia, +33 (1) 30 05 14 98
www.zoll.fr
Medio Oriente y África,
+96 278 800 4411
www.zoll.com
Países Bajos, +31 (0) 488 41 11 83
www.zoll.nl

Reino Unido, +44 (0) 1928 595 160
www.zoll.com
Rusia, +7495 936 2338
www.zoll.com

Para obtener las direcciones y los números de fax de las sucursales, así como otras ubicaciones en el mundo, visite www.zoll.com/contacts.

La forma de onda rectilínea bifásica de ZOLL: rendimiento real

La forma de onda rectilínea bifásica Rectilinear Biphasic™ (RBW) de ZOLL se diseñó específicamente para controlar las variaciones de la impedancia del paciente en la desfibrilación externa. Sólo la RBW de ZOLL demostró una superioridad clínica estadística² respecto a las formas de onda monofásicas en ensayos controlados aleatorios con revisión científica. Y ahora, con los datos de respaldo de más de 11.500 pacientes, puede estar seguro de la solidez de la evidencia de la RBW.



Compatibilidad integral de productos

El AED Pro y la E Series comparten electrodos, baterías y datos para diversas posibilidades de configuración sin problemas.

- Una caja de embalaje resistente o un maletín de transporte liviano protegen a la E Series de golpes y caídas, y brindan una garantía de por vida ilimitada del recubrimiento exterior
- Diseño delgado tipo maletín que facilita su transporte, almacenamiento y uso durante el transporte del paciente
- Reloj GPS que automatiza la sincronización de la hora en todos los equipos simultáneamente
- Novedoso sistema de estuches para organizar los cables para un uso más rápido
- EasyRead Tri-Mode Display™ siempre legible en cualquier circunstancia
- Protocol Assist CodeMarkers™ para una introducción rápida de información importante
- Real CPR Help™ proporciona información sobre la frecuencia y profundidad de las compresiones del tórax
- See-Thru CPR™ le permite ver el ritmo del paciente durante las compresiones
- Sistema de batería SurePower



RescueNet ¡listo!

Transfiere datos fácilmente desde la E Series y el AED Pro hasta la gama de opciones de recopilación de datos de campo de ZOLL, RescueNet. Busque el logotipo de RescueNet para compatibilidad de plug-and-play en todos los productos de desfibrilación y recolección de datos de ZOLL.



ZOLL es una empresa pionera en soluciones de reanimación, caracterizada por su consecuencia en la gestión, la propiedad y la visión durante aproximadamente 30 años. La empresa ZOLL, financieramente sólida e independiente, cuenta con productos de calidad apetecidos y registros de confiabilidad. A fin de colaborar con los avances de la reanimación, la tecnología de ZOLL incluye estimulación, desfibrilación, circulación, ventilación, gestión de datos y reanimación con líquidos. Esta tecnología integral ayuda a los médicos, a los profesionales médicos de los servicios de urgencia y a los reanimadores a reanimar a las víctimas de un paro cardíaco súbito o traumatismo. El compromiso de ZOLL es convertirse en una opción confiable para todos los proveedores del campo de la reanimación.

ZOLL®

Advancing Resuscitation. Today.™



¹La opción de See-Thru CPR sólo está disponible cuando el dispositivo funciona en modo manual.

²Para la desfibrilación de FV. "...los datos también demuestran la mejor eficacia de las descargas bifásicas rectilíneas de baja energía en los pacientes con alta impedancia transtórácica con un nivel de confianza del 90%." *Kerber et al. AHA Scientific Statement, Circulation. 1997;95:1677-82. Para la cardioversión de la FA: "...los datos demuestran la mejor eficacia de las descargas bifásicas rectilíneas de baja energía en comparación con las descargas monofásicas de alta energía para la cardioversión transtórácica de la fibrilación auricular."

©2007 ZOLL Medical Corporation. Reservados todos los derechos. "Advancing Resuscitation. Today.", Protocol Assist CodeMarkers, Real CPR Help, RescueNet, See-Thru CPR, SurePower, Tri-Mode Display y ZOLL Rectilinear Biphasic son marcas registradas de ZOLL Medical Corporation. AED Pro, CPR-D•padz, E Series, M Series, stat•padz y ZOLL son marcas registradas de ZOLL Medical Corporation. Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.